

Mode d'emploi du pistolet de massage backgym :



Merci d'avoir choisi un produit de backgym. (Page 1)

Avis de danger (page 2)

- Pour réduire le risque de blessure, le produit doit être utilisé comme suit :
- Le pistolet de massage du dos est réservé aux adultes.
- Utilisez le pistolet de massage du dos uniquement sur une peau sèche et propre.
- Utilisez le pistolet de massage du dos uniquement sur les parties molles du corps. Aucune douleur ou gêne ne doit se produire pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le pistolet de massage du dos sur la tête, le visage, les vertèbres cervicales ou la colonne vertébrale.
- Ne pas immerger le pistolet de massage du dos dans l'eau.
- Ne tenez pas le pistolet de massage du dos dans l'eau.
- Ne jetez pas le pistolet de massage sur le sol.
- N'essayez pas de démonter le pistolet de massage du dos.
- Évitez les traitements sur les parties du corps qui couvrent moins de muscles, comme les os de la hanche, l'arrière du pied, la rotule et autres zones similaires.
- Utilisez uniquement les accessoires de massage fournis.
- Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent utiliser le pistolet de massage du dos que sous la surveillance d'un adulte
- Selon la fonction et l'intensité réglées, un hématome (bleu) peut apparaître lors de l'utilisation du pistolet de massage du dos.

Vérifiez régulièrement la zone de massage pendant le massage. En cas de douleur ou de signes de malaise, arrêtez immédiatement l'application.


- Ne pas insérer les doigts, les cheveux ou toute autre partie du corps dans l'ouverture des attaches.
- L'utilisation du pistolet de massage du dos est interdite pour les indications médicales suivantes :
 - Tase sanguin / congestion sanguine
 - Sur une peau douloureuse et abîmée, pour les irritations cutanées
 - Si vous avez un stimulateur cardiaque et/ou un défibrillateur implanté.
- Si vous avez subi une intervention chirurgicale sur une articulation au cours des 90 derniers jours, le produit ne doit pas être utilisé à plus de 10 cm environ du site de l'opération.

Avertissements : (Page 3)


- Gardez le pistolet de massage du dos à l'abri des liquides et de la chaleur. Gardez-le au sec.
- Débranchez le câble du chargeur après l'avoir chargé.
- Utilisez le pistolet de massage du dos comme décrit dans le manuel d'utilisation.
- Il est recommandé de n'utiliser que le câble de chargement d'origine pour le chargement.
- Vérifiez le pistolet de massage et ses accessoires avant chaque utilisation



Description du produit et mise en service (pages 4 et 5)

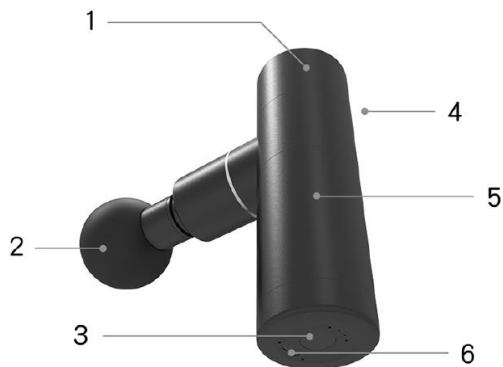

1. moteur puissant avec "technologie de glissement silencieux"
2. tête de massage
3. quatre niveaux de massage et deux modes de traitement préprogrammés
4. le pistolet de massage du dos est léger et très pratique
5. le boîtier en aluminium contient la batterie rechargeable. N'essayez pas de la retirer.
6. prise de charge USB. Veuillez utiliser le câble de chargement fourni pour le chargement.

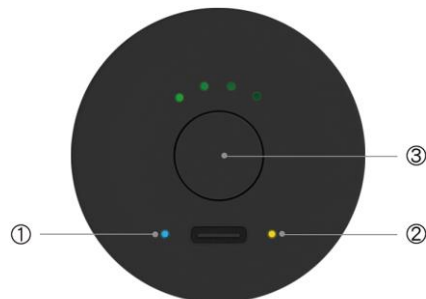

1. affichage des modes de traitement (bleu = mode fitness / blanc = mode thérapie)
2. indicateur de puissance
3. bouton marche/arrêt

Mise en service :

1. charger l'appareil avec le câble de chargement fourni.
2. appuyez sur le bouton de démarrage situé en bas et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour démarrer l'appareil
3. appuyez brièvement sur le bouton de démarrage pour modifier le niveau d'intensité de 1 à 4
4. appuyez deux fois rapidement sur le bouton de démarrage pour passer en mode de traitement Appuyez deux fois rapidement et de manière répétée sur le bouton Start pour passer en mode de traitement
5. le pistolet de massage du dos s'éteint automatiquement après 10 minutes pour des raisons de sécurité Il peut être remis en marche immédiatement et utilisé à nouveau.
6. appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil.
7. si le voyant d'alimentation s'allume en rouge, vous devez reposer le pistolet de massage du dos.

Les accessoires de massage :



Fixation de la tête ronde

Convient pour le massage de grandes surfaces de muscles et de zones sensibles.



Fixation de la tête de fourche

Convient pour masser le cou, la vision d'Achille et d'autres parties du corps similaires.



Fixation de la tête pointue

Convient pour masser la paume des mains, la plante des pieds et les points de déclenchement.



Fixation de la tête plate

Convient pour le massage des grands muscles et Les traitements de relaxation.



Cuillère en pièce jointe

Convient pour lisser les zones musculaires douloureuses et les fascias collants.

Données techniques :

- Nom : pistolet de massage de backgym
- Capacité de la batterie : 2000 mAh
- Puissance du moteur : 24 W
- Durée de chargement : environ 1,5 heure
- Durée de vie de la batterie : environ 3 heures
- Nombre d'étapes : 4
- Nombre de programmes : 2 (thérapie et fitness)
- Poids : 0,5 kilogramme

Installation d'accessoires de massage

Veillez à ce que le pistolet de massage du dos soit éteint. Insérez la partie arrière de la fixation dans l'ouverture (figure 1) et poussez-la à fond (figure 2).

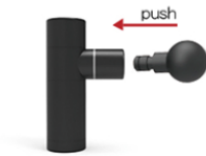


Figure 1



Figure 2

Entretien, nettoyage, stockage et transport

1. nettoyer le pistolet de massage du dos avec un chiffon humide et bien le sécher
2. entreposer le pistolet de massage de backgym dans un endroit sec
3. si vous n'utilisez pas le pistolet de massage du dos pendant une très longue période, vous devez le nettoyer et le recharger tous les 6 mois
4. l'emballage est adapté à un transport sûr.